

# Endobuttons para Sindesmose

STERILEEO


O sistema de endobuttons para sindesmose Knottech possui um mecanismo de inserção que retira a necessidade de fazer um acesso medial. O cabo permite que o button oblongo, após inserido, seja rotacionado abaixo dos tecidos, evitando interferência nos tecidos mediais

São duas opções de fixação: Button retangular que encaixa no oblongo da placa para fíbula; Button cilíndrico para amarração diretamente no osso



Os buttons são fabricados em Liga de Titânio conforme norma ASTM F136 e os fios com a composição de UHMWPE USP #5

Produto fornecido esterilizado em ETO com embalagem única

Button para Placa

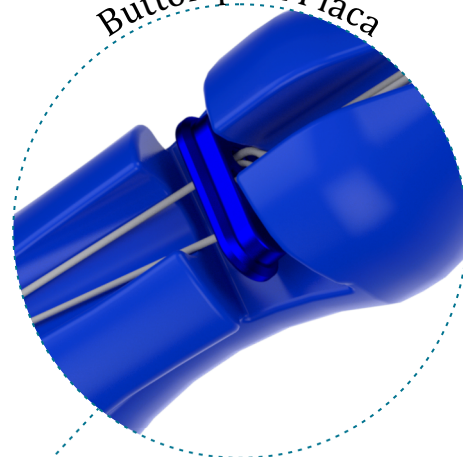

Button Cilíndrico

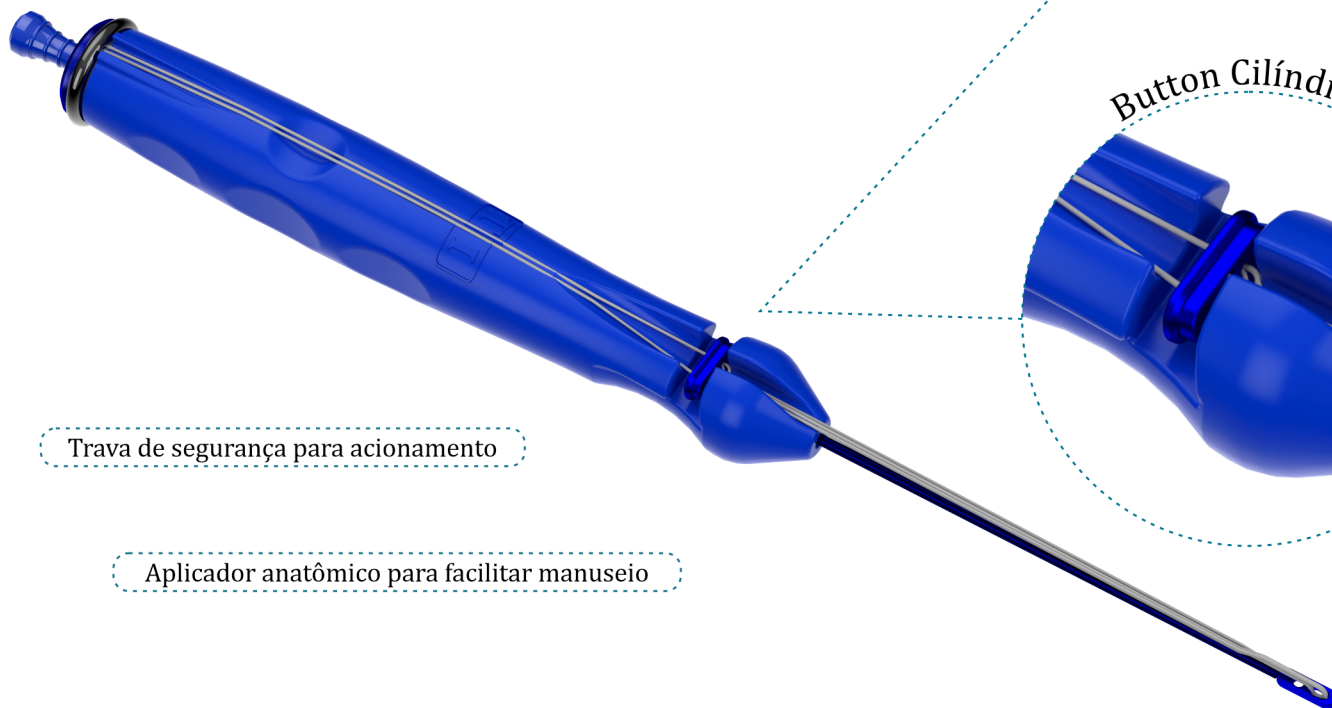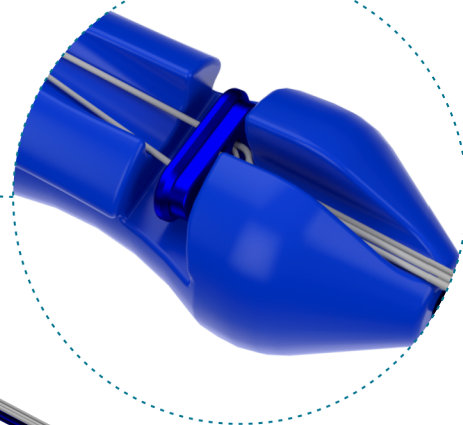

Trava de segurança para acionamento

Aplicador anatômico para facilitar manuseio

Fio UHMWPE #5  
Button oblongo medial  
Sistema de acionamento para  
rotacionar button

